

# HandyStep® touch · HandyStep® touch S

## Auf einen Blick

- Touch-Bedienung mit intuitiver Menüführung und integrierter Hilfe
- Als Modell HandyStep® touch oder HandyStep® touch S mit erweitertem Funktionsumfang erhältlich
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und Chinesisch
- Variable Volumeneinstellung von 1,0 µl bis 50 ml
- Induktiv aufladbar

## Im Detail

### Individuell

HandyStep® touch mit den Standardmodi Multi-Dispensieren, Auto-Dispensieren, Pipettieren und Favoriten;

HandyStep® touch S mit den Zusatzfunktionen Sequentielles Dispensieren, Multi-Aspirieren und Titrieren

### Ausdauernd

Viele Stunden Dauerbetrieb mit nur einer Akkuladung

### Robust

Lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien und einfache Reinigung/Desinfektion durch glatte Oberflächen.

### Sicher

Automatische Größenerkennung der BRAND PD-Tips //

### Effizient

Neben PD-Tips von BRAND können auch kompatible Dispensertips anderer Hersteller verwendet werden.

### Unkompliziert

Automatischer Spitzenabwurf durch Tastendruck vermeidet Kontamination.

### Komfortabel

Induktives Aufladen mit dem optionalen Ladeständer

### USB-C-Anschluss

Zum schnellen Laden mit Kabel

### Step-Taste

Ergonomisch angeordnete Step-Taste für müheloses Aufnehmen und Abgeben des Volumens



Ladeständer mit HandyStep® touch S und PD-Tip //

# Intuitive Bedienung

Flexibel bleiben und für jede Anwendung die richtige Lösung parat haben. Auch schwierige Abläufe lassen sich leicht umsetzen – mit dem erweiterten Funktionsumfang des HandyStep® touch S kein Problem.

Modus	Funktion	HandyStep® touch	HandyStep® touch S
Multi-Dispensieren (MULTI-DISP)	Schrittweises Dispensieren des eingestellten Volumens	✓	✓
Auto-Dispensieren (AUTO-DISP)	Automatisches Dispensieren durch das Gerät	✓	✓
Pipettieren (PIP)	Pipettieren eines definierten Volumens	✓	✓
Sequentielles Dispensieren (SEQ-DISP)	Schrittweises Dispensieren unterschiedlicher Volumina	–	✓
Multi-Aspirieren (MULTI-ASP)	Aufnahme unterschiedlicher Volumina	–	✓
Titrieren	Manuelle oder schrittweise Flüssigkeitsabgabe zur Titration	–	✓
Favoriten	Speicherung der Favoriten für schnellen Zugriff	✓	✓
Einstellungen	Individuelle Anpassung des Gerätes (z.B. Helligkeit oder Geräte name)	✓	✓




Erweiterter Funktionsumfang beim HandyStep® touch S:




Die übersichtlichen Menüs ermöglichen eine intuitive Handhabung und schnelles Arbeiten, die wichtigsten Funktionen und Parameter bleiben dabei immer im Blick.




**Verständlich**  
Hauptmenü mit allen Funktionen für schnelle Auswahl

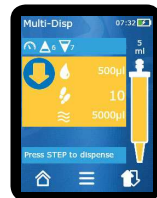

**Übersichtlich**  
Arbeitsmodus mit allen wichtigen Informationen

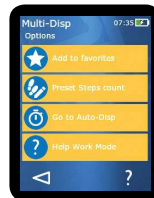

**Organisiert**  
Alle Optionen auf einen Blick

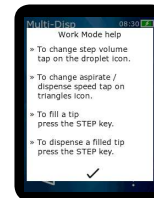

**Hilfreich**  
Interne Hilfe, direkt wo sie gebraucht wird

## Das perfekte Team

### Automatische Größenerkennung mit den PD-Tips // von BRAND

Der HandyStep® touch spart Zeit und vermeidet Fehler durch die automatische Größenerkennung der PD-Tips // von BRAND mit patentierter Codierung am Kolben. Nach dem Einsetzen wird die erkannte Tip-Größe automatisch angezeigt. Das zu dosierende Volumen kann nun schnell und einfach ausgewählt werden. Die Geräteeinstellung bleibt beim Einsetzen eines neuen PD-Tips gleicher Größe erhalten.



Multi-Dispensieren mit dem HandyStep® touch und PD-Tip //



Sequentielles Dispensieren mit dem HandyStep® touch S und PD-Tip //